

## VERITAS CAMPAIGN

キャンペーン期間

2020年 10月 1日(木)から  
12月 25日(金)まで

## 簡易型エンドトキシン試験システム

Endosafe<sup>®</sup> nexgen-PTS™

Endosafe<sup>®</sup> nexgen-PTS™は、エンドトキシンを短時間に測定する持ち運びが可能なシステムです。必要な試薬(ライセート試薬、合成発色基質、エンドトキシン標準品)がすべてカートリッジに封入されており、正確かつ簡便にエンドトキシン試験をおこなうことができます。本システムはUS FDAの認可済であり、現在の規制ガイドラインの国際調和に準拠しています。

測定時間は  
最短15分!!

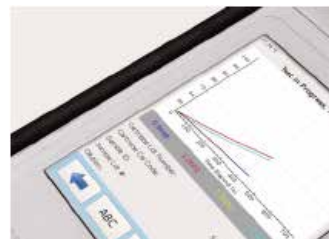
## キャンペーン特価

通常価格 1,600,000 円

↓  
**1,280,000 円** (※税別)

実施期間 : 2020/10/1~12/25 (当日のご注文分まで)

- 『簡便性』と『迅速性』を兼ね備えた FDA 認証機器
  - サンプルをカートリッジに入れるだけの簡単な操作 (保存検量線を採用し、測定時に検量線の作成が不要)
  - 測定時間は最短 15 分 (準備を合わせても約30分)
- 少量のサンプル量で測定可能
  - 測定に必要なサンプル量は合計100 μL (25 μL×4レーン)

Endosafe<sup>®</sup> nexgen-PTS™  
詳細情報はこちら :

Endosafe

検索

| 商品コード             | 商品名                    | 梱包単位 |
|-------------------|------------------------|------|
| CES-PTS150NW0400K | Endosafe nexgen-PTS 機器 | 1 台  |

## 【ご注意】

- 本キャンペーンご利用時には、お客さまへの操作説明、デモをオンライン会議システムを利用して実施します。
- 詳細は、同梱の操作説明書、操作説明動画にてご確認ください。
- 本キャンペーンご利用者には、弊社よりご利用状況(目的、測定サンプル、測定頻度など)をヒアリングさせていただきます。
- ご不明な点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

※ 掲載の情報はいずれも 2020 年 10月時点のものです。

日本総代理店

株式会社

ベリタス

〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目10-14  
住友東新橋ビル3号館5階  
TEL.03-5776-0078(代) FAX.03-5776-0076  
E-mail: veritas@veritastk.co.jp  
<https://www.veritastk.co.jp/>